

Конструкция "Все в одном"



Компактные гистероскопы

Тонкие, в компактном дизайне
диаметры 5.0 мм и 3.8 мм

Compact Hysteroscopes

Тонкие, в компактном дизайне
диаметры 5.0 мм и 3.8 мм

Тонкие, сконструированные в одном корпусе, компактные гистероскопы от Richard Wolf - воплощение не только эстетической привлекательности, но и практической пользы.

Хорошая эргономика, простая обработка и длительный срок эксплуатации отвечают таким качествам как: блестящая визуализация, правильная постоянная ирригация и большой, прямой рабочий канал.

Хорошо защищен


Прочная, компактная конструкция надежно защищает и стабилизирует высококлассную оптику PANOVIEW PLUS. Более длительный срок службы по сравнению с разборными гистероскопами.

Много пространства при малых размерах

Даже с относительно малым наружным диаметром, обе модели оснащены большим 5 Шр. рабочим каналом, который обеспечивает прохождение различных инструментов.



3.8 mm

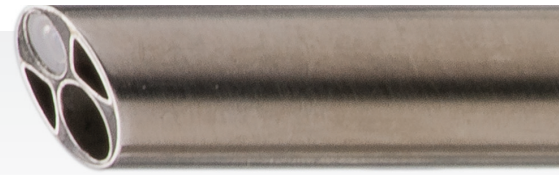

5.0 mm



Стандартное обследование становится нормой

Благодаря малому наружному диаметру, всего 3,8 мм, компактный гистероскоп является оптимальным выбором для высокоатравматического лечения фертильности и бесплодия пациентов.

Правильная постоянная ирригация

Два отдельных ирригационных и аспирационных каналов, обеспечивают постоянный и четкий обзор рабочего поля - даже когда инструмент проведен через рабочий канал.



Compact Hysteroscopes



spirit of excellence

Тонкие, в компактном дизайне
диаметры 5.0 мм и 3.8 мм

Просто прямой

Прямой рабочий канал 5 Шр. обеспечивает защиту инструментов от изгиба во время операции. Использование эргономичной рукоятки позволяет легко и удобно управлять эндоскопом.



Компактный гистероскоп	8986.401	89864021
Внешний диаметр	5.0 mm круглый	3.8 mm круглый
Рабочий канал	5.0 Шр.	5.0 Шр.
Направление взгляда	20°	30°
Длина	348 мм	352 мм
Рабочая длина	217 мм	217 мм
Вес	158 г	123 г

Компактный гистероскоп 5.0 мм

постоянная ирригация, направление взгляда 20°, прямой рабочий канал для инструментов до 5 Шр.8986.401

Компактный гистероскоп 3.8 мм

постоянная ирригация, направление взгляда 30°, прямой рабочий канал для инструментов до 5 Шр.89864021

Аксессуары

Эргономичная рукоятка8986.251

Щипцы для биопсии
(Ложковидные бранши)8642.6002

Щипцы для захвата "аллигатор".....8642.6502

Микроножницы8642.6812

Панч для биопсии8642.6312

Биполярный электрод "Bipotrode", 5 Шр. .823005

Корзина для обработки38044111

Гибкий световой кабель, длиной 2,3 м,
диаметр волокон 2,5 мм806625231

Резиновый колпачок "RIWO",красно - оранжевый
цвет, 10 шт. в упаковке88.01

Запорный кран,
комплект, 5 шт. в упаковке896.0002